


FLEKSIBLE DELPROTESER

- Æstetisk
- Høj styrke
- Fri for metal og monomer

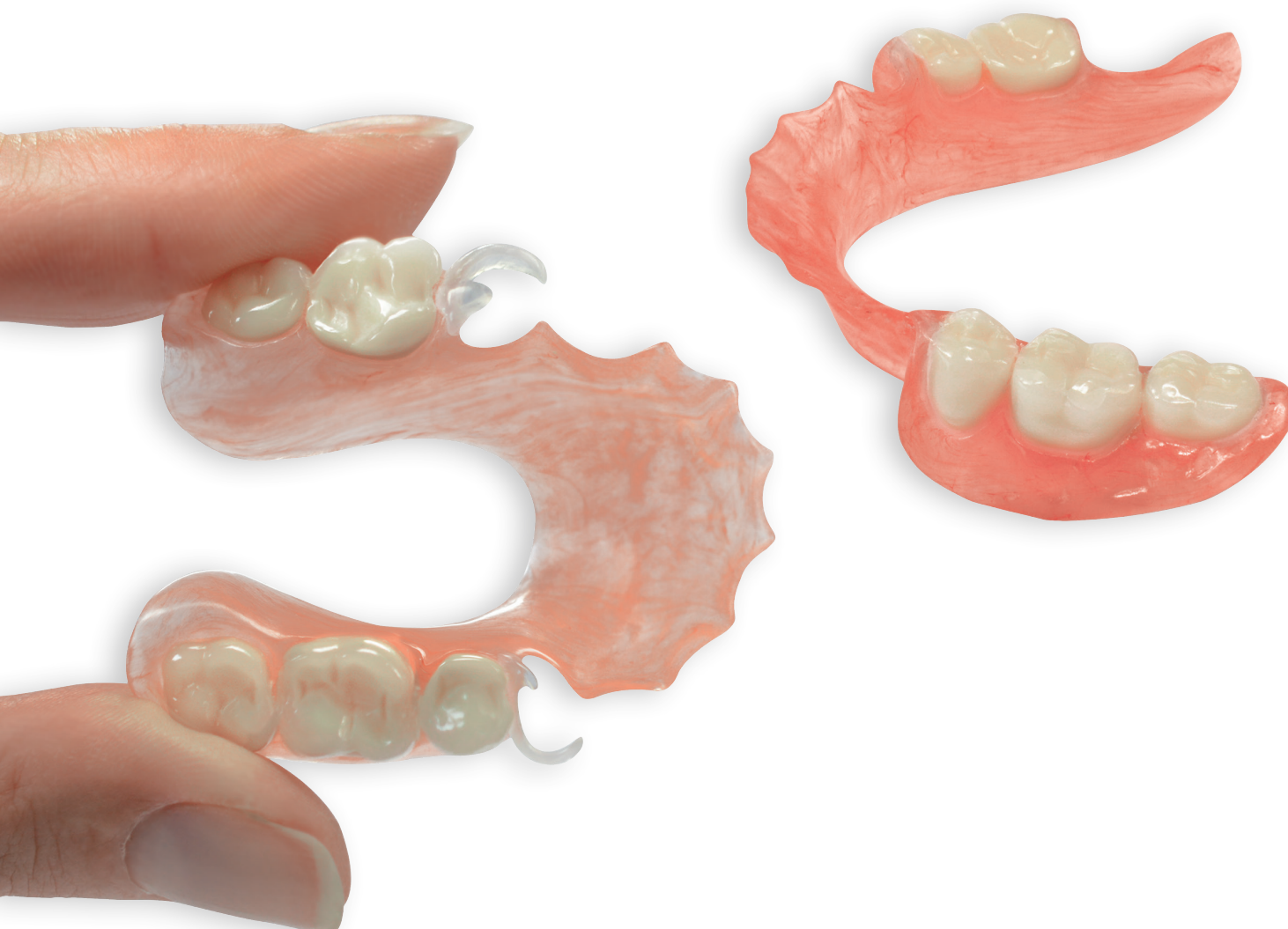

FLEKSIBLE DELPROTESER

Fordele, egenskaber og indikationer

En delprotese, med et stel fremstillet af termoplastisk polyamid, Vertex™ ThermoSens, giver patienten en ideel løsning til daglig brug. Den kombinerer fleksibilitet, translucens og styrke. Vertex™ ThermoSens er minimalt hydrofil og absorberer meget lidt/ingen fugt eller ubehagelige lugte, og er derfor ikke følsom over for farveændringer. Vertex™ ThermoSens er et fuldsyntetisk protesemateriale, som kan anvendes til patienter, der har svært ved at acceptere metalstel eller har allergi overfor krom-kobolt eller PMMA akryl. Materialet er monomer-frit.

Egenskaber

En fleksibel delprotese er meget let, smidig og vender altid tilbage til dens oprindelige form. Protesen egner sig derfor især til at dække anatomiske strukturer i underskæringer. Ved hjælp af nøjagtigt defineret, langvarig fleksibilitet passer protesestellet så godt, især ved unitorer ved irregulær tandstilling (billede 1), at der er langt færre trykpunkter. Der er klart brug for mindre tid til slibninger og/eller rettelser bagefter, især hos patienter, der plejer at reagere meget sensitivt på enhver ændring af deres protese. Som regel betragter patienten fleksibiliteten som en forbedring af komforten. Elasticiteten ligger imellem PMMA akryl og nylon.



Billede 1

Materialet er stærkt nok til også at kunne omfatte okklusale støtter.

Farvevalg

Takket være den store translucens er Vertex™ ThermoSens meget mindre iøjefaldende end det traditionelle protesestel i mindre gennemsigtigt akryl. Med de fem disponible farver: Transperant Pink (TTRV, billede 2), Orange Pink (TS, billede 3), Standard pink (T05, billede 4), Rødlig Pink (T10, billede 5) og Mørk Pink (T18, billede 6) er der en farve, der passer til de fleste patienter, og som tilpasser sig rigtig godt også i fronten. Derfor kan Vertex™ ThermoSens-materialet også bruges som gingivafarvet



Billede 2:
Transperant Pink
(TTRV)



Billede 3:
Orange Pink (TS)



Billede 4:
Standard Pink (T05)



Billede 5:
Rødlig Pink (T10)



Billede 6:
Mørk Pink (T18)



Billede 7

bøjle (billede 1). Hvis du ikke angiver den ønskede farve på bestillingssedlen, bliver Vertex™ ThermoSens-delprotesen automatisk fremstillet i farven "Standard Pink". For den synlige del facialt kan protesen også fremstilles med gennemsigtige eller tandfarvede bøjler (billede 7/8).

Indikationer

Vertex™ ThermoSens delproteser er specielt velegnede som midlertidig protese inden unitor, som ekstensionsled og som immediatprotese. Desuden er de yderst velegnede som midlertidig protese ved implantatbehandling. Takket være den høje resistens er det farvebestandige materiale næsten uforgængeligt. Materialet kan nemt poleres, hvorfor eventuelle nødvendige ændringer nemt kan udføres i tandlægestolen. Vertex™ ThermoSens-protoser er selvfølgelig også velegnede som en permanent løsning.

Begrænsning

På grund af karakteren af materialet er det ikke muligt at reparere/udvide eller rebasere de fleksible protoser.



Billede 8

Vores tandteknikere rådgiver dig gerne og/eller udarbejder et uforpligtende tilbud